


# myobrace®

МИОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ОРТОДОНТИЯ С БРЕКЕТАМИ

Серия Myobrace for Braces™  
для постоянного прикуса с брекетами.

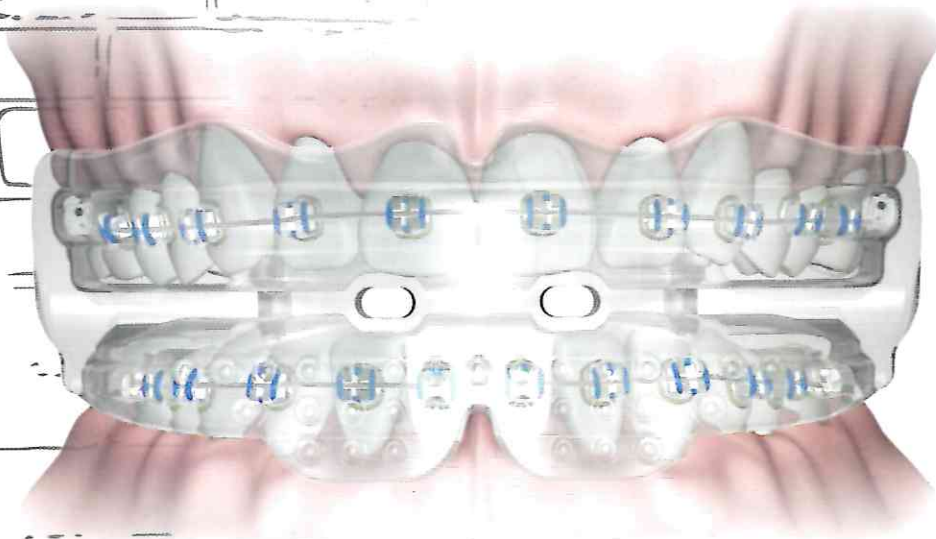

Повышает эффективность ортодонтического лечения на брекетах  
за счёт исправления функции дыхательных путей  
и нейромышечной дисфункции.

[www.myoresearch.com](http://www.myoresearch.com)



# myobrace®

## Миофункциональная ортодонтия


Более 25 лет назад компания *Myofunctional Research Co (MRC)* стала выпускать стандартные аппараты для исправления вредных привычек, таких как ротовое дыхание, прокладывание языка между зубами и неправильное глотание. Аппараты можно использовать до, во время и после лечения на несъёмных брекетах, чтобы повысить эффективность ортодонтического лечения, особенно в трудных случаях. Лучше всего использовать аппараты в раннем постоянном прикусе.

**«В большинстве случаев аномалии прикуса связаны с нарушением дыхания и нейро-мышечной дисфункцией.»**


Дыхание и нейромышечная дисфункция не только вызывают аномалии прикуса, но и замедляют ортодонтическое лечение и ведут к рецидиву. Кроме того, если нарушения дыхания и нейромышечную дисфункцию не лечить, могут развиваться и другие проблемы со здоровьем, такие как дисфункция ВНС и расстройства сна. Серия *Myobrace for Braces™* помогает лечить вредные миофункциональные привычки одновременно с ортодонтическим лечением на брекетах.

Пациенты всё чаще выбирают ортодонтическое лечение без удаления зубов. Система *Myobrace* используется с самолигирующимися брекет-системами для достижения оптимальной формы верхней зубной дуги.

*Myobrace®* способствует развитию зубных дуг, т.к. язык занимает правильное положение, поднимаясь к верхней челюсти. Лечение проходит быстрее, и даёт более стабильные результаты, даже в сложных случаях.

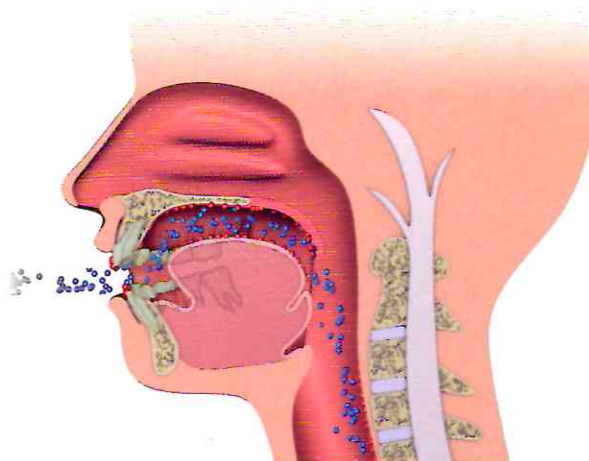

**СЕРИЯ MYOBACE FOR BRACES™ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ДЫХАНИЯ**

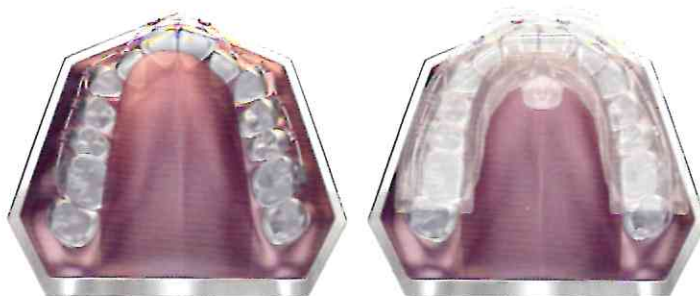

**РАСШИРЕНИЕ ЗУБНОЙ ДУГИ АППАРАТАМИ V1 И V2**

## Как работает *Myobrace®*

Компания *MRC* лидирует в применении аппаратов ранней миофункциональной коррекции для детей. С ними ортодонтическое лечение становится проще, эффективнее и стабильнее. Ключевой аспект лечения — научить ребёнка дышать носом, держать язык прижатым к нёбу, и путём тренировок восстановить функцию ротовых мышц.

Результаты лечения:

- Более эффективное и стабильное расширение верхней челюсти.
- Сокращение срока лечения в сложных случаях, таких как открытый прикус.
- Коррекция аномалий II класса без сильного механического воздействия.


- Снижение риска развития дисфункции ВНС и нарушений сна в будущем.
- Как правило, улучшается развитие лица.



Правильное дыхание



Правильное положение языка

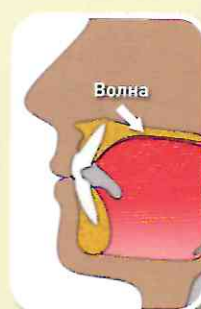

Правильный тип глотания



# Myobrace for Braces™

**PERMANENT  
DENTITION  
WITH BRACES**

Серия Myobrace for Braces™ рассчитана на три этапа лечения. Она разработана специально для использования с брекетами для исправления вредных миофункциональных привычек, развития обеих челюстей и дополнительного выравнивания


зубов в постоянном прикусе.

Действие аппаратов направлено на коррекцию миофункциональных привычек, ведущих к скученности зубов. Аппараты оказывают легкое расширяющее действие на верхнюю челюсть, выравнивая зубные дуги и помогая брекетам перемещать зубы в правильное положение.



- 1 Канал для брекетов** — для размещения верхних (и нижних) брекетов и ортодонтической дуги, а также для защиты щек и десен.
- 2 Маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка** — вырабатывают правильное положение языка в куполе неба.
- 3 Увеличенный губной бампер и высокие борта** — снимают гиперактивность губ и способствуют носовому дыханию.

**B1**

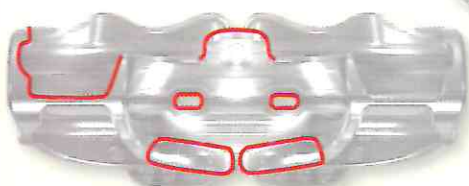

АППАРАТ B1 (слева)  
B1 — ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ (вверху)

## MYOBACE® B1

Аппарат B1 исправляет вредные привычки.

У него есть канал для брекетов, маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка, увеличенные губные бамперы и высокие борта для исправления положения языка, снятия гиперактивности губ и нормализации носового дыхания в процессе лечения на несъемных брекетах.

**B1 Ling**



АППАРАТ B1 LING (слева)  
B1 LING — ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ (вверху)

## MYOBACE® B1 LING

Аппарат B1 LING исправляет вредные привычки.

У него есть канал для брекетов, маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка, увеличенные губные бамперы и высокие борта для исправления положения языка, снятия гиперактивности губ и нормализации носового дыхания в процессе лечения на несъемных лингвальных брекетах.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИВЫЧЕК

ЭТАП 1

**B2**



АППАРАТ B2 (слева)  
B2 — ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ (вверху)

## MYOBACE® B2

Аппарат B2 развивает зубную дугу.

У него есть канал для лингвальных брекетов, каркас *Dynamicore™*, маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка, увеличенные губные бамперы и высокие борта для исправления положения языка, снятия гиперактивности губ и нормализации носового дыхания в процессе лечения на несъемных брекетах.

РАСШИРЕНИЕ ЗУБНОЙ ДУГИ

ЭТАП 2

**B3**



АППАРАТ B3 (слева)  
B3 — ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ (вверху)

## MYOBACE® B3

Аппарат B3 исправляет вредные привычки на этапе ретенции.

У него есть расширенный канал, маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка, увеличенные губные бамперы и высокие борта для исправления положения языка, снятия гиперактивности губ и нормализации носового дыхания в процессе лечения на элайнерах.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИВЫЧЕК НА ЭТАПЕ РЕТЕНЦИИ

ЭТАП 3



## С ЧЕГО НАЧАТЬ

### Шаг 1 Изучение материалов

Первым делом ознакомьтесь с материалами на сайте [myoresearch.com](http://myoresearch.com). Там вы найдете подробную информацию о миофункциональной ортодонтии и системе аппаратов MRC. Это позволит вам приступить к лечению простых случаев.

### Шаг 2 Встреча с представителем MRC

Обратитесь к ближайшему представителю MRC, чтобы получить подробную информацию об аппаратах и методах лечения. Он также сообщит вам о курсах MRC, предоставит необходимые материалы для обучения врачей, сотрудников и пациентов клиники.

### Шаг 3 Посещение обучающего курса

Наш курс позволит вам изучить более широкий ряд клинических случаев, достичь сотрудничества с пациентом и повысить коммерческую отдачу от лечения. Данный курс обучает внедрению метода миофункциональной коррекции в практику для оптимизации лечения каждого случая.



### Посетите практический семинар MRC

Миллионы детей страдают аномалиями прикуса. Традиционное ортодонтическое лечение выравнивает зубы, но не лечит причины нарушений.

Чтобы не наступил рецидив, пациенту приходится всю жизнь носить ретейнеры. *Миофункциональная ортодонтия* одновременно лечит верхние дыхательные пути и нейромышечную дисфункцию. Это шаг вперед для специалистов в области стоматологии, и отличное современное решение для детей.

Чтобы узнать, как лечить аномалии прикуса по системе компании MRC, посетите семинары опытных врачей компании MRC, регулярно использующих этот метод в своей практике в Сертифицированных центрах *Myobrace*®. Эта система лечения быстро набирает популярность у пациентов и врачей. Компания MRC на своём примере показывает, насколько она выгодна при правильном применении.

Если вы хотите начать использовать аппараты компании MRC, свяжитесь с ближайшим представителем компании, или зайдите на сайт [myoresearch.com](http://myoresearch.com).



## ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КЛИНИК MYOBACE

Программы поддержки клиник *Myobrace*® разработаны для стоматологов и ортодонтотв, желающих быстро и эффективно ввести миофункциональную ортодонтию в свою практику.

Международная сеть программы объединяет стоматологов и ортодонтотв, стремящихся предоставить своим пациентам полное и высококачественное миофункциональное ортодонтическое лечение. Специалистам, участвующим в Программе поддержки клиник *Myobrace*®, предоставляется доступ к образовательным и вспомогательным материалам, разработанным компанией MRC.

### Для чего получать статус Участника программы Myobrace®?

- Вы сможете лечить больше пациентов от 5 до 15 лет.
- Увеличится количество пациентов в вашей клинике.
- Сократится время, проведенное пациентом в кресле врача.
- Лечение будет финансово выгодно как для врачей, так и для пациентов.
- Ортодонты будут улучшать здоровье детей, а не только эстетику.



Более подробную информацию можно получить на сайте [www.myoresearch.com](http://www.myoresearch.com) или у представителя компании MRC

#### АВСТРАЛИЯ — ГЛАВНЫЙ ОФИС:

44 Siganto Drive Helensvale QLD 4212  
[australia.hq@myoresearch.com](mailto:australia.hq@myoresearch.com) | Tel: 61 7 5573 5999

#### ЕВРОПА:

Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands  
[europe.hq@myoresearch.nl](mailto:europe.hq@myoresearch.nl) | Tel: 31 416 651 696

#### США:

9267 Charles Smith Avenue Rancho Cucamonga CA 91730  
[usa.hq@myoresearch.com](mailto:usa.hq@myoresearch.com) | Tel: 1 909 587 4940

#### РОССИЯ:

000 «Миобрэйс» 115114, Москва, ул. Летниковская, дом 5.  
[rus@myobrace.com](mailto:rus@myobrace.com) | +7 495 748 10 37 | [myoresearch.ru](http://myoresearch.ru)

**myobrace**®

Посетите сайт [www.myoresearch.com](http://www.myoresearch.com)  
MYOBACE® от компании MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.

