



WHO'S AFRAID OF WATER ?

Clinical

A-Silicone Impression material

elite HD+

*Когда гидрофильность превращается
в ТОЧНОСТЬ.*

ZHERMACK представляет **ELITE HD+**.

Уникальный оттисковый материал, способный гарантировать отличные результаты при любых клинических случаях благодаря совмещению инновационных **нанотехнологий** и великолепной **гидрофильности**.





elite[®] HD+
HYDROPHILIC

+ БОЛЕЕ ГИДРОФИЛЬНЫЙ

- › Мгновенная гидрофильность, появляющаяся уже через две секунды

+ БОЛЕЕ ТЕКУЧИЙ

- › Добавление в состав наночастиц, увеличивает текучесть материала в области десневой борозды

+ БОЛЕЕ ТОЧНЫЙ

- › Синергическая комбинация нанотехнологии и мгновенной гидрофильности гарантирует точное воспроизведение любых деталей

+ БОЛЕЕ УНЕВЕРСАЛЬНЫЙ

- › Полная гамма материалов с различной текучестью и временем схватывания предусматривает любые клинические случаи

+ БОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫЙ

- › Новая система 5:1 для автоматических смесителей не нуждается в переходных устройствах и оснащена системой быстрого сцепления наконечника

+ ПОЛНОТА ГАММЫ

- › Широкий выбор материалов подходит на все случаи жизни

elite HD+

Гидрофильность
взаимодополняет

ЭФФЕКТЫ ГИДРОФИЛЬНОСТИ

МГНОВЕННАЯ ГИДРОФИЛЬНОСТЬ

Технология совмещения предварительно обработанных нанонаполнителей со специальными элементами, снижающими поверхностное натяжение, придает **Elite HD+** повышенную текучесть по истечении всего 2 секунд после помещения материала на препарлируемый участок.

ТЕСТ С КАПЛЕЙ



ОБЫЧНЫЙ СИЛИКОН




Капля через 2 секунды

ELITE HD+



Капля через 2 секунды

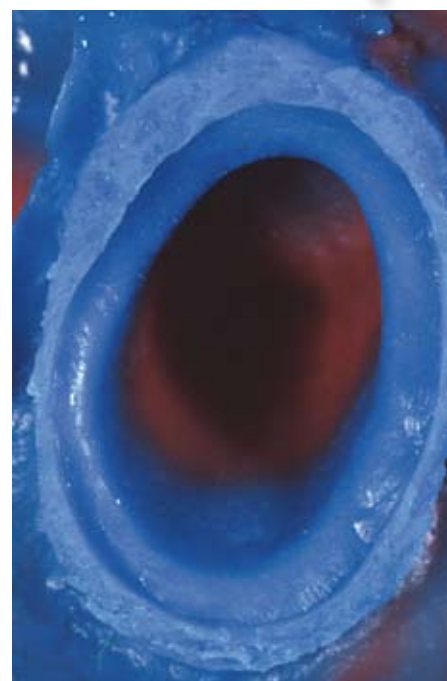

ELITE HD+ light

ИДЕАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

Эффект **мгновенной гидрофильности** позволяет почти мгновенно воспроизвести любую деталь, значительно снижая риск образования пузырьков воздуха.

и нанотехнология
ощая комбинация.


ЭФФЕКТЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ

ИДЕАЛЬНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ

Использование наночастиц (20 нанометров), обработанных на молекулярном уровне полярными гидрофильными агентами, позволяет **ELITE HD+** достигнуть идеальной текучести в области десневой борозды.



normal setting

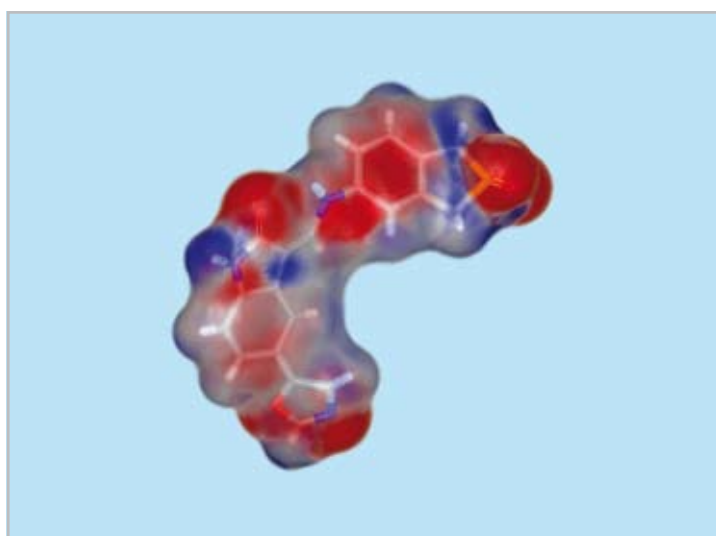

Корректирующий силикон под электронным микроскопом

ТЕКУЧЕСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Эффект нанотехнологии также проявляется, когда во время снятия оттиска на материал оказывается давление. В этот момент **ELITE HD+** становится более текучим, что позволяет ему проникнуть в самые труднодоступные участки.

elite HD+

Техники снятия оттиска.

Продукт	Предлагаемая техника	Предлагаемая комбинация
ELITE HD+ Putty Soft Fast ELITE HD+ Maxi Putty Soft Fast	Двойной оттиск	ELITE HD+ Light Body Fast ELITE HD+ Super Light Body Fast
ELITE HD+ Putty Soft Fast ELITE HD+ Maxi Putty Soft Fast	Двойное смешивание	ELITE HD+ Light Body Fast
ELITE HD+ Putty Soft Normal ELITE HD+ Maxi Putty Soft Normal	Двойное смешивание	ELITE HD+ Light Body Normal ELITE HD+ Regular Body Normal
ELITE HD+ Tray Material Heavy Body ELITE HD+ Maxi Tray Material Heavy Body	Двойное смешивание	ELITE HD+ Light Body Fast ELITE HD+ Light Body Normal ELITE HD+ Regular Body Normal
ELITE HD+ Monophase Medium Body ELITE HD+ Maxi Monophase Medium Body	Монофазная	

Упаковка

C203050 ELITE HD+ SUPER LIGHT BODY FAST SETTING	2 картриджа (База + Катализатор) 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников
C203146 ELITE HD+ SUPER LIGHT BODY FAST SETTING	10 картриджей (База + Катализатор) 50 мл
C203040 ELITE HD+ LIGHT BODY FAST SETTING	2 картриджа (База + Катализатор) 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников
C203142 ELITE HD+ LIGHT BODY FAST SETTING	10 картриджей (База + Катализатор) 50 мл
C203030 ELITE HD+ LIGHT BODY NORMAL SETTING	2 картриджа (База + Катализатор) 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников
C203140 ELITE HD+ LIGHT BODY NORMAL SETTING	10 картриджей (База + Катализатор) 50 мл
C203035 ELITE HD+ LIGHT BODY NORMAL SETTING	1 тубик Базы 90мл + 1 тубик Катализатора 90 мл
C203020 ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING	2 картриджа (База + Катализатор) 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников
C203144 ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING	10 картриджей (База + Катализатор) 50 мл
C203025 ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING	1 тубик Базы 90мл + 1 тубик Катализатора 90 мл
C202032 ELITE HD+ TRAY MATERIAL (Heavy Body)	2 картриджа (База + Катализатор) 50 мл + 6 зеленых смесительных наконечников
C202062 ELITE HD+ TRAY MATERIAL (Heavy Body)	20 картриджей (База + Катализатор) 50 мл
C202320 ELITE HD+ MAXI TRAY MATERIAL (Heavy Body)	2 картриджа (База + Катализатор) 380 мл + 15 динамостатичных смесительных наконечников + 2 фиксатора
C202330 ELITE HD+ MAXI TRAY MATERIAL (Heavy Body) ECO	6 картриджей (База + Катализатор) 380 мл + 2 фиксатора
C202020 ELITE HD+ MONOPHASE (Medium Body)	2 картриджа (База + Катализатор) 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников
C202050 ELITE HD+ MONOPHASE (Medium Body)	10 картриджей (База + Катализатор) 50 мл
C202300 ELITE HD+ MAXI MONOPHASE (Medium Body)	2 картриджа (База + Катализатор) 380 мл + 15 динамостатичных смесительных наконечников + 2 фиксатора + 1 шприц для эластомеров + 15 интраоральных канюль
C202310 ELITE HD+ MAXI MONOPHASE (Medium Body) ECO	6 картриджей (База + Катализатор) 380 мл + 2 фиксатора + 3 шприц для эластомеров + 45 интраоральных канюль
C203000 ELITE HD+ PUTTY NORMAL SETTING	1 банка Базы 250 мл + 1 банка Катализатора 250 мл
C203002 ELITE HD+ PUTTY NORMAL SETTING ECO	2 банки Базы 450 мл + 2 банки Катализатора 450 мл
C203010 ELITE HD+ PUTTY FAST SETTING	1 банка Базы 250 мл + 1 банка Катализатора 250 мл
C203012 ELITE HD+ PUTTY FAST SETTING ECO	2 банки Базы 450 мл + 2 банки Катализатора 450 мл
C202340 ELITE HD+ MAXI PUTTY NORMAL SETTING	2 картриджа (База + Катализатор) 380 мл + 15 динамостатичных смесительных наконечников + 2 фиксатора
C202350 ELITE HD+ MAXI PUTTY NORMAL SETTING ECO	6 картриджей (База + Катализатор) 380 мл + 2 фиксатора
C202360 ELITE HD+ MAXI PUTTY FAST SETTING	2 картриджа (База + Катализатор) 380 мл + 15 динамостатичных смесительных наконечников + 2 фиксатора
C202370 ELITE HD+ MAXI PUTTY FAST SETTING ECO	6 картриджей (База + Катализатор) 380 мл + 2 фиксатора

elite HD+
не боится воды.

elite[®] HD+

HYDROPHILIC



F211004/A - 04/2011 GPLCOMMUNICATION.COM

Адгезивы

C700025 UNIVERSAL TRAY ADHESIVE	Адгезив для стандартных металлических ложек: 1 флакон 10 мл
C700080 ELITE IPERLINK LCT	Би-компонентный адгезив для оттисковых ложек из светоотверждаемой пластмассы: 1 Prep 5 мл + 1 Link 5 мл
C700070 ELITE IPERLINK SCT	Монокомпонентный адгезив для оттисковых ложек из пластика и самоотверждающейся пластмассы: 1 флакон 5 мл

Аксессуары

C202070	48 желтых смесительных наконечников
C202090	48 желтых интраоральных канюль
C202080	Зеленые смесительные наконечники (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1
C207203	Плунжер для диспенсера D2 - 1:1
C205530	Динамическо-статичные смесительные наконечники (50 шт.)
C205540	Блокираторы наконечников (2 шт.)
C207200	Шпатель для силиконов
C207202	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (12 листов)
HI-TRAY	Доступен широкий выбор стальных и пластиковых оттисковых ложек
C207202	Шприц Zhermack для эластомеров

Kits

C203100	Elite HD+ Intro Kit - Normal Set: 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 1 x 50 мл картридж Light Normal + 1 x 50 мл картридж Regular Normal + 1 диспенсер D2 + 12 желтых смесительных наконечников + 6 интраоральных канюль
C203120	Elite HD+ Intro Kit - Fast Set: 2 x 250 мл банки Putty Fast (База + Катализатор) + 1 x 50 мл картридж Light Fast + 1 x 50 мл картридж Super Light Fast + 1 диспенсер D2 + 12 желтых смесительных наконечников + 6 интраоральных канюль

Оборудование

C309030	Автоматический смеситель Modulmix (230 В)
---------	---

Аксессуары для оборудования

XR0240550	Голубые боковые панели	XR0240520	Набор для настенного крепления для 1 Modulmix
XR0240551	Оранжевые боковые панели	XR0240530	Набор для настенного крепления для 2 Modulmix
XR0240552	Синие боковые панели	XR0240505	Основание для настольной установки для 1 Modulmix
XR0240553	Зеленые боковые панели	XR0240500	Основание для настольной установки для 2 Modulmix
XR0240554	Белые боковые панели	XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240555	Серые боковые панели	XR0240630N	230 В адаптер

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 73 11
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermack.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661-4195
Tel. +1 (877) 819-6206
+1 (732) 389 8540
Fax +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
+44 - (0) 7870 690811
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

FRANCE
Tel. 0800 - 915083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 - 55 - 91980497
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 - 2601777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack[®]
BEYOND INNOVATION